



دفترچه راهنمای

ماساژور ۱۰ سر

LM-999B

با تشکر از انتخاب محصول ما.

لطفا دفترچه راهنمای استفاده صحیح و مناسب با دقت مطالعه فرمایید.

فهرست

۱	زمان و روش مناسب استفاده
۱	کنترل سرعت
۲	روش استفاده از ماساژور بر قسمت های مختلف بدن
۳	دستورالعمل های مهم امنیتی
۴	سری های ماساژور برای نقاط تعیین شده بدن
۵	نام هر یک از اجزا

زمان و روش مناسب استفاده

وسیله بازی نمی کنند باید توسط برگترها تحت نظارت قرار بگیرند.

مشخصات فنی

وزن : ۱۰.۲ کیلوگرم - ۲۰۶۴ پوند


ابعاد : ارتفاع ۱۳۰ * عرض ۱۲۰ * طول ۴۵۰ میلیمتر
ولتاژ : ۲۲۰ ولت - ۲۴۰ ولت

قدرت : ۳۰ وات

فرکانس : ۵۰ هرتز

پالس بر ثانیه : ۱.۰۰۰ - ۵.۰۰۰

کنترل سرعت

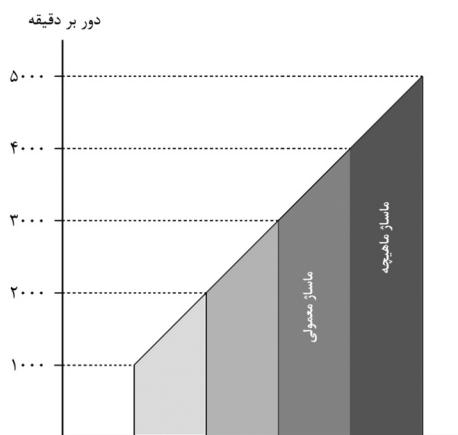

۱. ساعت بعد از بیدار شدن

۲. ساعت بعد از وعده غذایی

۳. قبل از خواب

۴. بعد از ورزش سنگین

۵. از برق ۲۰۰-۲۴۰ ولت استفاده نمایید.

۶. لطفا دسته ماساژ را محکم نگه دارید و با سرعت دلخواه ماساژ دهید.

۷. سری را در قسمت مورد نظر بدن قرار دهید و با سرعت دلخواه ماساژ دهید.

۸. بمنظور ماساژ بهتر، به ترتیب از بازوها، پاه، پشت و کناره ها شروع کنید.

۹. بمنظور رفرش شدن و عملکرد صحیح بدن بعد از ماساژ یک لیوان آب بنوشید.

احتیاط

۱. بیش از ۲۰ دقیقه از ماساژور استفاده ننمایید.

۲. ماساژور مجهرز به محافظت است، به همین دلیل در صورت استفاده بیش از ۲۰ دقیقه بصورت اتوماتیک متوقف می شود. (یه این معنی نیست که دستگاه دیگر قادر به کار کردن نیست، سوییچ خاموش می شود و بعد از ۳۰ دقیقه ماساژور مجدد قابل استفاده خواهد بود.)

۳. ماساژور رو بدون متعلقاتش استفاده ننمایید.

۴. در صورتی خرابی سیم برق، بمنظور جلوگیری از خطر باید توسط بخش فنی و یا تولید کننده و بر اساس شرایط گارانتی تعویض گردد.

۵. استفاده از این ماساژور برای بچه ها و افراد ناتوان بدون نظارت توصیه نمی شود.

۶. برای اطمینان از اینکه کودکان با این

روش استفاده از ماساژور بر قسمت های مختلف بدن



پایین کمر



ماهیچه ها



کتف و شانه



ساق پا



پشت



کف دست



ران پا



بازو



کمر



ساعده



شکم



زانو / ران پا

ماساژور باید حتما با متعلقاتی که در سری آن نصب می شود مورد استفاده قرار بگیرد.
باز کردن، جدا سازی قطعات و تغییر در ساختار ماساژور توسط افرادی خارج از بخش فنی شرکت
باعث خارج شدن محصول از گارانتی می شود.

دستورالعمل های مهم امنیتی

خطر

- در صورتی که سیم و یا دو شاخه برق دچار آسیب دیدگی هستند هرگز از ماساژور استفاده ننمایید.
- از انداختن و یا وارد کردن هر گونه شی به داخل ماساژور جلوگیری نمایید.
- از ماساژو فقط برای ماساژ همانگونه که در دفترچه راهنمای توضیح داده شده است استفاده نمایید. از هیچ گونه سری ای که توسط کارخانه تعیین نشده است استفاده ننمایید.
- از حمل کردن ماساژور از طریق سیم برق و یا کشیدن زیاد سیم برق خودداری فرمایید.
- در مکان های که محصولات آیروسول در حال استفاده است و یا اکسیژن در حال تزریق شدن است از ماساژور استفاده ننمایید.
- در فضای باز از ماساژور استفاده ننمایید.
- برای خاموش کردن ماساژور سوییچ را خاموش کنید، آنگاه ۲ شاخه را از برق جدا نمایید.
- سیم برق را از سطوح گرم دور نمایید.
- اتصال ال ماساژور را به یک خروجی صحیح زمین متصل نمایید.

احتیاطات

- ماساژور برای موارد زیر نباید مورد استفاده قرار بگیرد :
- ناحیه های ملتهب و متورم، یا جوش های پوستی (شکستگی، تاول، جراحات و غیره)
 - در صورت داشتن دردی ناشناخته بر روی ساق پا، قبل از استفاده حتماً با پزشک مشورت کنید.
 - غده تیروئید
 - رگهای واریسی

هشدار

- بهمنظور جلوگیری از خطر آتش گرفتن، شوک الکتریکی، سوختگی و آسیب به شخص :
- از استفاده زیر پتو، بالشت و یا هر مکانی که امکان تهویه مناسب وجود ندارد خودداری فرمایید.
 - نظرات از نزدیک در هنگام استفاده کودکان و افراد معلول مورد نیاز است.
 - ماساژور هنگامی که برق متصل است نباید بدون استفاده رها شود. زمانی که از ماساژور استفاده نمی کنید و یا قبل از تمیز کردن دو شاخه را از برق بکشید.

می گیرد.

Massager Stick : برای ماساژ پوست های ضعیف و ورزش های طب سوزنی و ران پاها مورد استفاده قرار می گیرد.

Cute Massage Stick : برای ماساژ مفاصل بدن، همچنین کمر، کتف، پشت و ران پا مورد استفاده قرار می گیرد.

Flat Massager Stick : برای ماساژ ماهیچه، شکم، تمام پشت، ران و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

- گوش ها، چشم ها، بیضه ها یا تخم دان ماساژ باید راحت و آرامش بخش باشد، در غیر اینصورت حتماً با پزشک خود مشورت کنید.

خانم های بار دار - هشدار ویژه در ناحیه های پایین شکم، پایین کمر، بالای شکم و یا نزدیکی تخم دان ها مورد استفاده قرار نگیرد. فقط بالای کمر. اگر هر سوالی دارید با پزشک خود مشورت کنید.

سری های ماساژور برای نقاط تعیین شده بدن

Needle Stick : قابل استفاده برای تحریک کردن نقاط ضربه ای سوزنی بر روی بدن، مخصوصاً کف دست، کف پا و ران پا همانند آنکه تحت درمان طب سوزنی هستید.

Cautery Stick : طراحی شده برای از بین بردن چربی ها و همچنین برای ماساژ دادن شکم، کمر، ران پا و کتف ها.

Blood Line Massager Stick : در ورزش های طب سوزنی و ناحیه پروسه های مورد استفاده قرار می گیرد.

Head Massager : بر روی کمر، کتف و پشت مورد استفاده قرار می گیرد.

Point Massager : برای ماساژ نقاط بدن مورد استفاده قرار می گیرد.

Gem Articulation Stick : برای ماساژ مفاصل کمر، زانوها و آرنج ها مورد استفاده قرار می گیرد.

Soft Brush Type Stick : برای ماساژ گردن، کتف ها و ماهیچه ها مورد استفاده قرار



Needle Stick



Gem Articulation Stick



Cautery Stick



Soft Brush Type Stick



Blood Line Massager Stick



Massager Stick



4 Head Massager



Cute Massager Stick




Point Massage



Flat Massager Stick

نام هر یک از اجزا

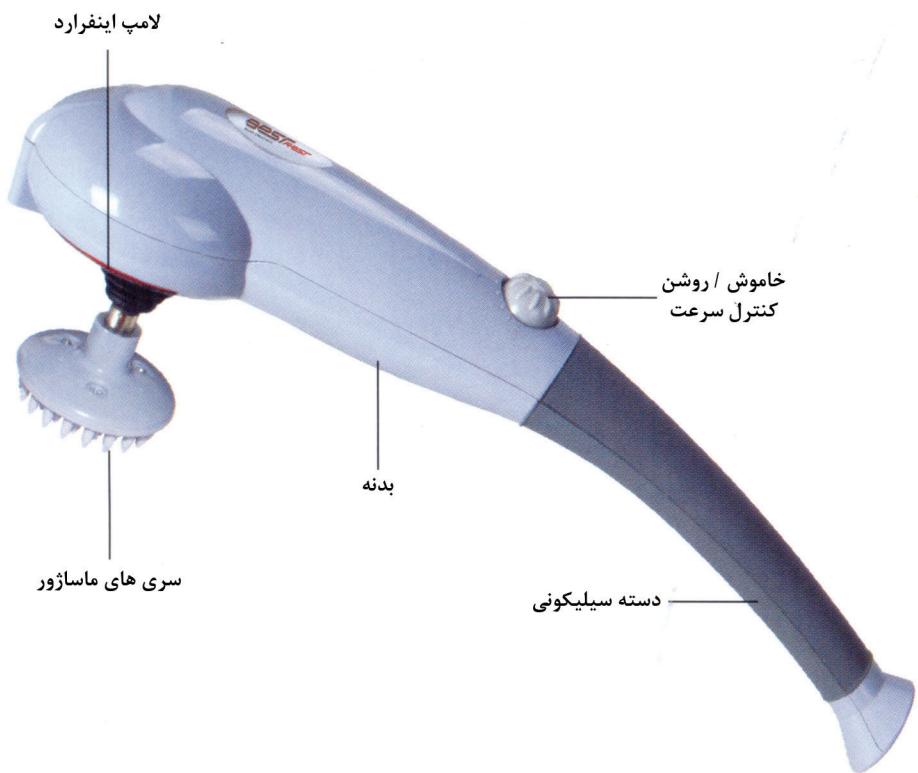



شرکت نیکان آسا پرشین
نماينده انحصاری محصولات بست رست در ایران

BESTrest

تجربیش - خ غلام جعفری - مجتمع تندیس - ط ۶ شرقی - واحد ۷
No 607, 6th East Floor, Tandis Building, Jafari St., Tajrish Sq.

 @bestrestmassage
 bestrestmassagechair

www.nikanasa.ir
 22 74 98 39-40