



دفترچه راهنمای

ماساز پا
RK-858

با تشکر از انتخاب محصول ما.
لطفا دفترچه راهنمای استفاده صحیح و مناسب با دقت مطالعه فرمایید.

فهرست

| | |
|---|-----------------------------------|
| ۱ | نکات امینی |
| ۳ | ساختار محصول |
| ۳ | ویژگی های محصول |
| ۳ | آماده سازی قبل از استفاده |
| ۴ | روش استفاده از ریموت کنترل |
| ۵ | دستورالعمل استفاده از ریموت کنترل |
| ۶ | نگهداری و تعمیر |
| ۷ | عیب یابی و مشخصات فنی |

با تشکر از انتخاب محصولات ما، لطفاً بمنظور استفاده صحیح و مناسب، نکات ایمنی را قبل از استفاده با دقت مطالعه فرمایید. مطالعه نکات ایمنی به شما کمک می‌کند تا از محصول بصورت کاملاً ایمن بهره ببرید و از برخی خطرات اجتناب کنید. تمامی نکات ایمنی به دو عبارت "هشدار" و "توجه" تقسیم بندی شده‌اند. بعد از مطالعه لطفاً آن را در جایی که به راحتی قابل دسترس و خواندن است نگه دارید.

هشدار

| | |
|---|---|
| استفاده از منبع برق ولتاژ متفاوت ممکن است باعث ایجاد خطر شوک الکتریکی و آتش سوزی شود. | از منبع برق با ولتاژ غیر مشخص استفاده نکنید |
| بمنظور حفظ سلامت دستگاه، برق را قطع کنید و ۲ شاخه را از برق بکشید. | اگر دستگاه به یکباره خاموش شود |
| دو شاخه را از برق بکشید و با فروشنده تماس حاصل فرمایید. | در زمان استفاده از دستگاه با مشکل رو برو شدید |
| لطفاً برق را قطع کنید و ۲ شاخه را از برق بکشید. | وقتی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید. |
| بمنظور جلوگیری از بروز خطر، صبر کنید تا بخش آسیب دیده توسط پرسنل نگهداری تعویض گردد. | وقتی سیم یا دو شاخه برق آسیب دیده است |

- از پوکی استخوان رنج می‌برید.
- دچار مشکل گردش خون و یا گرفتگی رگ های خونی هستید.
- عفونت پوستی دارید.
- تحت درمان و یا درمان‌های کمکی هستید.
- بدنتان دارای بیماری غیرمعمولی هست.
- ۲. در حالی که پوشش بیرونی آسیب دیده و یا بخش مکانیکی و الکترونیکی دارای نقص هستند از ماساژور استفاده نکنید. لطفاً با با بخش فنی تماس حاصل فرمایید.
- ۳. لطفاً در مکان‌های خیس و یا دمای بالا و یا هرجایی که تجهیزات گرمایشی از قبیل

توجه
بیش از ۳۰ دقیقه از دستگاه استفاده نکنید.
استفاده طولانی باعث بروز دردهای عضلانی و عصبی می‌شود.

۱. اگر دچار یکی از حالت‌های زیر هستید با پزشک قبل از استفاده مشورت نمایید:
 - بیماری قلبی دارید.
 - به تارگی عمل جراحی داشته اید.
 - اگر از دستگاه ضربان ساز قلب و یا سایر دستگاه‌های پزشکی داخل بدن استفاده می‌کنید.
 - دارای آسیب و یا شکستگی استخوان هستید.
 - در دوران حاملگی و یا بعد از زایمان هستید.

- سوزی شود. مراقب باشید در حال استفاده از ماساژور خوابتون نبرد و در صورت داشتن قب از ماساژور استفاده ننمایید.
۱۴. جانمایی ماساژور باید بر اساس این دفترچه راهنما باشد.
۱۵. از ماساژور بعنوان تجهیزات بیمارستانی استفاده ننمایید.
۱۶. هنگامی که به برق متصل است دستگاه را ترک نکنید.
۱۷. بمنظور جلوگیری از تغییر رنگ، تغییر شکل، ترک و یا شکستگی، ماساژور را در مکان هایی که در مجاورت مواد خورنده از قبیل گاز، تیز، الكل و سفید کننده قرار ندهید.
۱۸. این محصول برای افراد معلول و یا کسانی که اختلال حس گری و یا مغز و اعصاب دارند و یا افرادی که عدم تجربه و یا دانش دارند مناسب نیست. (همچنین کودکان)
۱۹. از تماس مستقیم با پوست خودداری فرمایید.
۲۰. به کودکان اجازه بازی با ماساژور را ندهید.
۲۱. این ماساژور مجهز به سیستم گرمایشی است. لطفا اگر به حرارت حساس نیستید نسبت به این عملکرد توجه ویژه داشته باشید.
- هیتر برقی و کوره وجود دارند استفاده ننمایید.
۴. از مالیدن مواد آرایشی و بهداشتی بر روی ماساژور قبل از استفاده و یا در حین استفاده خودداری فرمایید.
۵. اجازه تعییر دستگاه به شخصه را ندارید، برای رفع مشکل فنی، دستگاه را به مرکز خدمات فنی بفرستید، در غیر اینصورت دستگاه از گارانتی خارج می شود.
۶. از انداختن و یا تکان دادن سنگین دستگاه خودداری فرمایید.
۷. از پیچیدن سیم به دور ماساژور و یا قرار دادن آن بین پا بمنظور جلوگیری از خطر خودداری فرمایید.
۸. از ایستادن بر روی ماساژور و یا قراردادن اجسام سنگین بر روی آن خودداری فرمایید.
۹. در صورت مشاهده هر گونه ایراد با بخش فنی تماس حاصل فرمایید.
۱۰. بمنظور جلوگیری از آسیب، اجازه گرفتن و یا ضربه زدن به گوی های ماساژ دهنده در حال استفاده را ندارید.
۱۱. لطفا از استفاده ماساژور در مکان های مرطوب و خیس از قبیل حمام و یا استخر بمنظور جلوگیری از بروز خطر پرهیز کنید.
۱۲. بمنظور جلوگیری از ایجاد خطر، اگر سیم برق چهار آسیب شد منتظر پرسنل فنی برای تعویض سیم بمانید.
۱۳. از آسیب رساندن، خم کردن، تاکردن، کشیدن، گره زدن و یا جدا سازی و یا قرار دادن سیم برق زیر اجسام سنگین خودداری فرمایید چون ممکن است باعث ایجاد آتش

ساختار محصول

مکانیزم منحصر به فرد بالابرنده، می تواند برای رضایت افراد با قدرهای مختلف تا ۷ سانتیمتر افزایش ارتفاع پیدا کند.

۴. ماساژ کامل فشار کیسه هوا برای پا ۲۶ کیسه هوای ماساژ دهنده که توانایی تشخیص ماساژ کامل برای جلوی پا، پشت و کناره های پا را دارد و ۳ سطح قدرت ماساژ می تواند تمام احتیاجات افراد مختلف را بطرف کند.

۵. مکانیزم ماساژ ۳ بعدی همانند دست انسان در مرکز


مکانیزم جدید ماساژ، پا را همانند دست انسان با فشار بر نقطه طب سوزنی ماساژ می دهد.

آماده سازی قبل از استفاده

۱. مکان مناسب

لطفاً ماساژور را در جای خشک بدون قرار گرفتن در معرض نور طولانی قرار دهید. بمنظور کاهش صدای ماساژور در هنگام کارکرد (نویز) از یک فرش زیر ماساژور استفاده نمایید.

۲. برق را وصل کنید
دو شاخه را به برق وصل کنید.

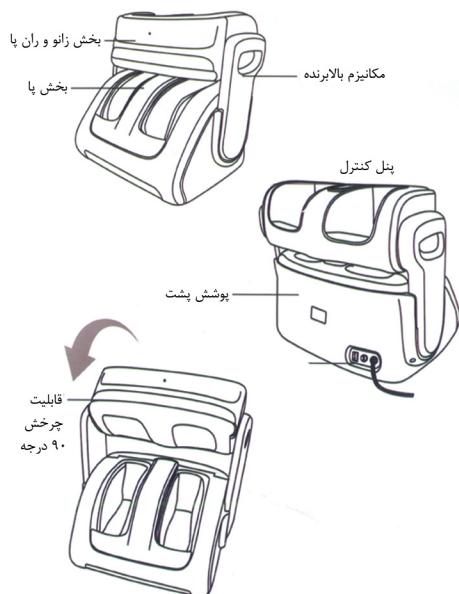

ویژگی های محصول

۱. محافظت ۳۶۰ درجه برای زانوی شما
طراحی منحصر به فرد خلاقانه برای محافظت ۳۶۰ درجه زانو، می تواند ماساژ و درمان حرارتی برای جلو، پشت، چپ و راست را تشخیص دهد. می تواند خستگی را کاهش دهد و محافظت موثر مفصل های زانو را بهبود بخشد.

۲. طراحی چرخشی پاها
طراحی منحصر به فرد چرخشی پاها که تاثیر بسزایی در مراقبت کامل پاها دارد، می تواند ماساژ کامل بر روی پا و زانو را انجام دهد.

۳. بخش پایی می تواند بالا یا پایین روید

مطمین شوید سیم برق در سلامت کامل قرار دارد. مطمین شوید قبل از روشن کردن دستگاه سوییج روشن/خاموش در وضعیت خاموش باشد.

با دست خیس سیم را لمس نکنید.

روشن است) چراغ تنظیم قدرت روشن است نکته : این برنامه برای حالتی که فریم پشتیبانی باز نیست مناسب است.

- بخش پا

- کلید گرمایش : بمنظور کنترل عملکرد گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. لطفاً این دکمه را فشار دهید. زمانی که چراغ قرمز را نشان می دهد گرمایش در بالاترین حالت و زمانی که سبز است در پایین ترین حالت قرار دارد.

- بالا : مداوم این کلید را فشار دهید، این کلید ارتفاع مناسب برای زانو را فراهم می کند. مداوم فشار دهید و زمانی که به ارتفاع مناسب برای زانو ها رسیدید کلید را رها کنید.

- کلید **on-off** : فشار دهید، چراغ شروع به چشمک زدن می کند، مجدداً فشار دهید، چراغ ثابت می شود. سپس می توانید هر برنامه ماساژی را که می خواهید انتخاب کنید. مجدداً فشار دهید، چراغ شروع می کند به چشمک زدن و دستگاه خاموش می شود.


- کلید **Auto 2** : کلید 2 Auto را فشار دهید، گرمایش (چراغ گرمایش روشن است)، گوی های ماساژ کار می کند (چراغ روشن است) چراغ قدرت روشن است. نکته : این برنامه برای حالتی که فریم پشتیبانی باز است مناسب است.

- بخش پا : کلید برای ماساژ پا - گرمایش در حین ماساژ پا.

- گوی های ماساژ : خاموش یا روشن کردن

روش استفاده

۱. شاخه را به پریز وصل کنید.
۲. سوییچ را که در کنار کاور پشتی قرار دارد باز کنید. زمانی که دستگاه روشن است چراغ سوییچ کنترل پنل چشمک می زند.
۳. دکمه **on-off** را روشن کنید. چراغ شروع به چشمک زدن می کند.
۴. فریم پشتیبانی ماساژور را بلند کنید و پاها را داخل ماساژور بگذارید.
۵. برنامه دلخواه برای ماساژ را انتخاب کنید.

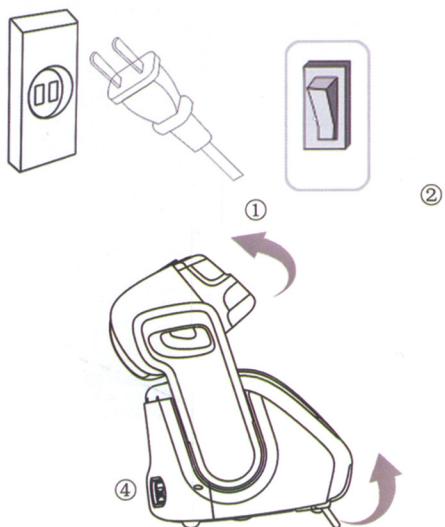

روش استفاده از ریموت کنترل

دستورالعمل دکمه های ریموت کنترل

- کلید **Auto 1** : کلید 1 Auto را فشار دهید : گرمایش (چراغ روشن است)، گوی های ماساژ کار می کند (چراغ گرمایش روشن است)

راهنمای ریموت کنترل


بمنظور عملکر بہتر، ریموت را به وسط ماساژور در فاصله ۲ متری پایی بگیرید. (بدلیل اینکه سنسور اینفراراد در مرکز پایی تعییه شده است.)

لطفا قبل از استفاده داخل ریموت کنترل باتری بگذارید. در صورت استفاده نشدن به مدت طولانی باتری جدید جایگزین کنید.

نکته :

1. توجه فرمایید تمامی دکمه ها و عملکرد ریموت کنترل ها بغیر از دکمه توقف یکسان می باشد.

2. وجود ریموت کنترل ضروری است.

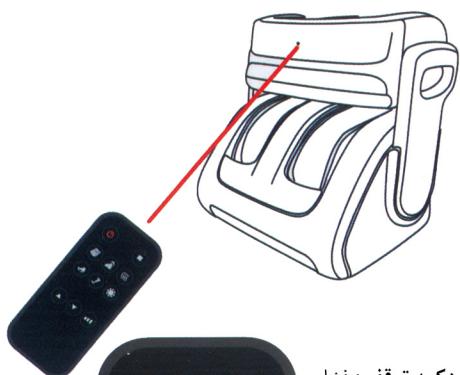


دکمه توقف : فشار
دادن دکمه توقف
باعث متوقف شدن
دستگاه و فشار
مجدداً باعث ادامه
دستگاه می شود.

گوی های ماساژ دهنده.

- قدرت : بمنظور تنظیم قدرت کیسه های گویی استفاده می شود. زمانی که ماساژور در حال کار کردن است این دکمه را فشار دهید. زمانی که چراغ قرمز را نشان می دهد گرمایش در بالاترین حالت و زمانی که سبز است در پایین ترین حالت قرار دارد.

- پایین : کلید را مداوم فشار دهید، زانویی بصورت مداوم پایین می آید، کلید را رها کنید تا متناسب با ارتفاع شما متوقف شود.

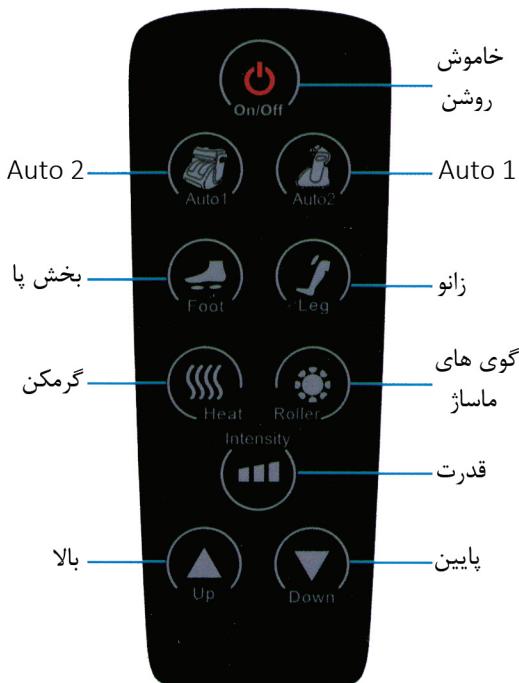

نگهداری

هشدار

در هنگام نگهداری و تمیزکاری لطفاً دستگاه را خاموش نمایید و از ۲ شاخه جدا فرمایید. بعد از استفاده اگر ماساژور لک شد با استفاده از یک پارچه نم دار حاوی مواد شوینده خنثی ماساژور را تمیز کنید. (به هیچ وجه از مواد شیمیایی از قبیل بنزین، الکل و تینر جهت تمیز کردن سطح خارجی ماساژور استفاده ننمایید). سپس با استفاده از یک دستمال خشک آن را تمیز کنید و اجازه دهید بصورت طبیعی خشک شود. (به هیچ وجه از روش های سریع خشک کردن برای خشک کردن ماساژور استفاده ننمایید). محل ایمن برای استفاده و نگهداری

لطفاً تحت شرایط زیر نگهداری شود :
دما : بین ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد
رطوبت : بین ۳۰ تا ۸۵ درصد بدون مه

لطفاً توجه فرمایید : در مکان های خیس و یا دمای بالا قرار ندهید. در مکان هایی که دارای گازهای خورنده هستند قرار ندهید. خیلی نزدیک به اجسام حرارتی قرار ندهید. در معرض مستقیم نور خورشید قرار ندهید.

عیب یابی

| راه حل | علت | عیب |
|---|-------------------------------|---|
| لطفاً سیم را متصل نمایید | سیم برق به درستی متصل نیست | |
| لطفاً سوییچ کنار کاور پشتی را روشن کنید | سوییچ کنار کاور پشتی باز نیست | خوب کار نمی کند |
| فیوز را تعویض نمایید | فیوز سوخته است | بعد از روشن کردن سوییچ کنار کاور پشتی دستگاه روشن نمی شود و چراغ چشمک نمی زند |
| دستگاه ۱ بمدت ۱ ساعت خاموش کنید و مجدداً روشن کنید. | استفاده بلند مدت | صداهای شدید در هنگام ماساژ |
| به مدت ۳۰ دقیقه ای ۱ ساعت از ماساژور استفاده ننمایید. | استفاده بلند مدت | احساس گرما در سطح ماساژور |
| در صورت مشاهده هر گون ایجاد فنی که در بالا ذکر نشده بود با فروشنده و یا بخش فنی تماس حاصل فرمایید | | |

ساختار محصول

| ماساژور پا | |
|-----------------------|---|
| وزن خالص : ۲۳ کیلوگرم | مدل : RK858 / RK858A |
| فرکانس : ۵۰ هرتز | ولتاژ : AC100V—110V, AC120V 60Hz AC220V 50/60Hz, AC240V 50Hz |

۲ مدل وجود دارد : RK858، RK858A و RK858 برای پاهای ۲۷ سانتیمتر مناسب است. اگر پاهای شما بیشتر از ۲۷ سانتیمتر بود لطفا RK858A را انتخاب کنید. لطفا بر اساس شرایط اساسی انتخاب کنید.



شرکت نیکان آسا پرشین
نماينده انحصاری محصولات بست رست در ایران

BESTrest

تجربیش - خ غلام جعفری - مجتمع تندیس - ط ۶ شرقی - واحد ۷
No 607, 6th East Floor, Tandis Building, Jafari St., Tajrish Sq.

 @bestrestmassage
 bestrestmassagechair

www.nikanasa.ir
 22 74 98 39-40