



# RT1052

Deep Tissue  
Massage Gun

دارای 3 برنامه خودکار

سرعت قابل تنظیم در 4 سطح

باتری لیتیومی قابل شارژ

## چه افرادی طرفدار ماساژور تفنگی آرونت هستند؟

ماساژور تفنگی آرونت یک محصول بنام و معروف در سالن های ورزشی میباشد که به پاکسازی اسید لاکتیک، از بین بردن توده های چربی، رفع گرفتگی و کوفتگی عضلات، تسریع و بهبود جریان خون و افزایش دامنه حرکت عضلات کمک میکند. بجز ورزشکاران، متخصصان تناسب اندام و فیزیوتراپ ها نیز از ماساژور تفنگی استفاده میکنند. ماساژور تفنگی آرونت میتواند یک وسیله بسیار مفید برای تمام اقشار مردم باشد





طراحی

عملکرد بالا و  
دقیق

جزئیات

باتری قابل  
شارژ



# طراحی

برای طراحی و ساخت ماساژور تفنگی آروننت با مهندسين مکانیک و متخصصين صدا همکاری کرده ایم تا این محصول با دقت و عملکرد بی نظیر و عالی به مرحله تولید برسد .

ماساژور تفنگی آروننت مدل RT-1025 در سلامت و درمان عضلانی بدن ، یک انقلاب عظیم میباشد.  
این دستگاه با ضربه های بسیار سریع و مکرر باعث تحریک و افزایش جریان خون میشود.

رنگ بندی  
کلاسیک



طوسی



طراحی ساده  
(T شکل)

بسته بندی زیبا  
و  
لوکس


آبی

طراحی ارگونومیک  
جهت جلوگیری از  
لغزش

## عملکرد با دقت بالا و بسیار دقیق

یک موتور کامالا مهندسی شده ، ساخته شده برای حداکثر کارای و قابل اطمینان

ساختار موتور نسبت به دستگاه های دیگر بسیار متفاوت و پیشرفته تر میباشد و از تکنولوژی بالایی در ساخت آن از بهره گرفته شده تا صدا و لرزش دستگاه به حداقل ممکن کاهش پیدا کند . در این مدل از عایق صدا استفاده شده تا صدا و ارتعاشات را به حداقل برساند.

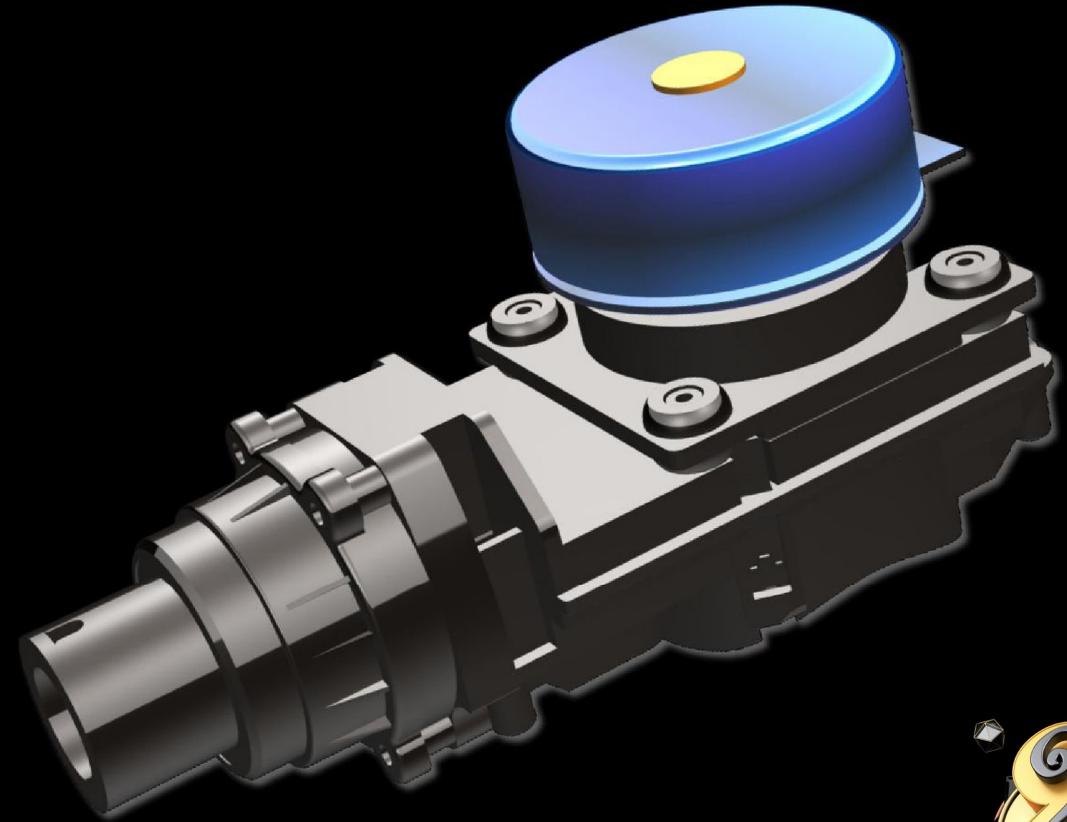

- ✓ ۲۰% صرفه جویی در انرژی
- ✓ ۵ برابر طول عمر بیشتر موتور
- ✓ صدای کمتر از ۵۰ db



این ماساژور تفنگی علاوه بر تسکین درد عضلانی باعث از بین رفتن کوفتگی و گرفتگی عضلات و نیز بازیابی (recovery) عضلات بعد از تمرینات سخت و یا فعالیت های روزمره میشود. این دستگاه برای از بین بردن درد پا، کمر، گردن و شانه که ناشی از نشستن های طولانی در هنگام کار و یا سفر میباشد بسیار مفید و موثر بوده.

### ۳ برنامه ماساژ خودکار

#### برنامه ۳

از سرعت سطح ۳ و ۴ استفاده میکند. این برنامه برای تسکین درد های عمیق عضلانی و کوفتگی های شدید ضربه های شدیدتری را منتقل میکند.


#### برنامه ۲

از سرعت سطح ۱ و ۲ شروع میشود و به آرامی به سرعت سطح ۳ و ۴ تغییر میکند. این برنامه برای بازیابی عضلات بعد از فعالیت های ورزشی و سخت طراحی شده است.

#### برنامه ۱

از سرعت سطح ۱ استفاده میکند. این برنامه برای آرام کردن عضلات با حرکتی خفیف و شدت پایین ایجاد شده است.

طول حرکت بازویی دستگاه و ضربات ۱۲ میلی متر میباشد و تعداد ضربات در بالاترین سطح سرعت بیش از ۲۹۰۰ ضربه در دقیقه میباشد

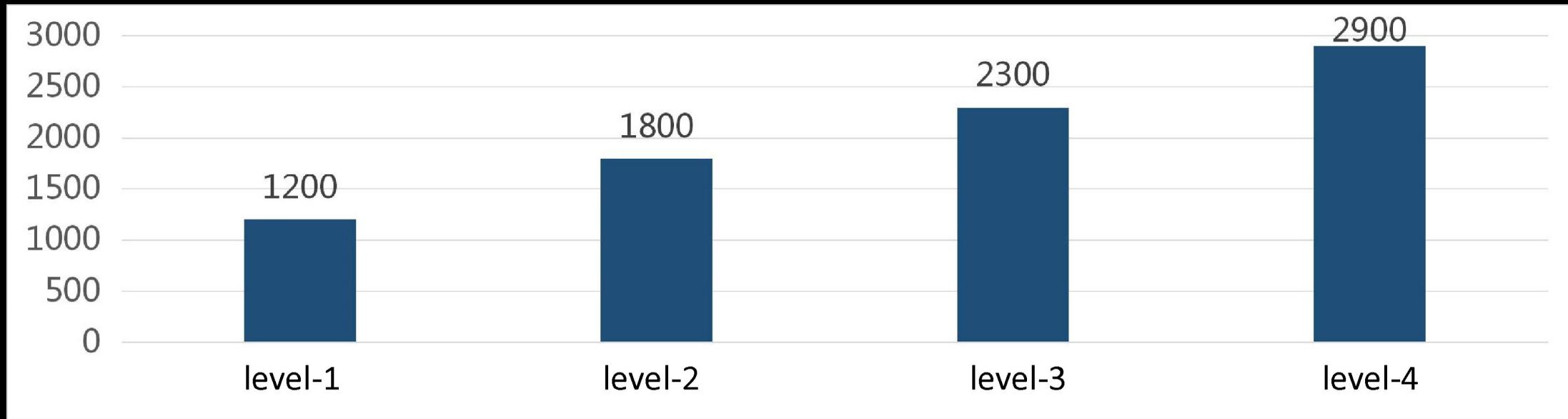

این دستگاہ شامل ۶ سری مجزا میباشد که از سری های بزرگتر برای عضلات حجیم و بزرگ و از سری های کوچک برای بافت های حساس و عضلات کوچک استفاده میشود.



عمدتا برای ناحیه  
ستون فقرات  
استفاده میشود.

مناسب برای  
تمام قسمت های  
بدن




عمدتا برای  
عضلات بزرگ و  
حجیم استفاده  
میشود

عمدتا برای  
عضلات شکم و  
کمر استفاده  
میشود




مناسب برای  
مفاصل و بافت  
های عمیق عضلات

عمدتا برای اندام  
های تحتانی و  
شانه ها استفاده  
میشود

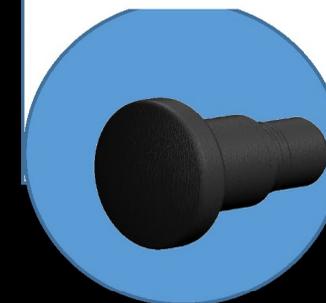

در حدود ۶۳۹ عضله اسکلتی (حدود ۶ میلیارد فیبر عضلانی) در بدن یک انسان عادی وجود دارد. طول این فیبرها و رشته های عضلانی از ۱ میلی متر تا ۶۰ سانتی متر متغیر می باشد. در تصاویر زیر مدت زمان توصیه شده برای هر گروه عضلانی و دفعات آن برای جلوگیری از آسیب توضیح داده شده است.


بطور پیش فرض ۱۰ دقیقه ماساژ و ۳ مرتبه (نامتوالی) برای قسمت های مختلف بدن مناسب می باشد.

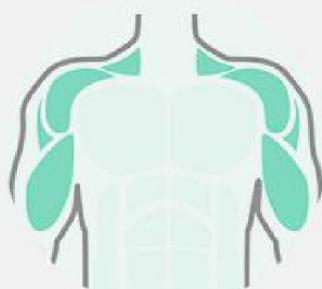

عضلات

کتف و شانه

15s~20s x 3次

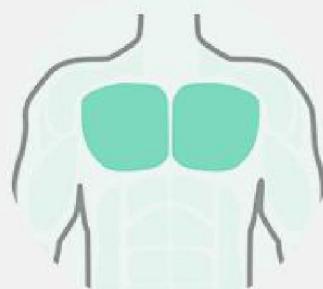

عضلات

سینه


30s



عضلات

پشت

30s~1min x 3

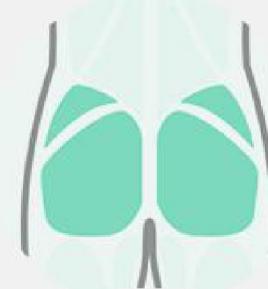

عضلات

لگن

30s~1min x 4次



عضلات

پا

20s~30s x 3次

## باتری قابل شارژ و متحرک

Energy saving&eco-friendly

باتری لیتیوم یون، قابلیت استفاده بیشتر با هر بار شارژ باتری؛  
ولتاژ خروجی : ۲۴ V - جابجایی ایمن محصول؛  
باتری قابل شارژ به دو روش ، هم میتوان باتری را بطور مستقل شارژ  
کرد هم در حالت اتصال به دستگاه؛


✓ ظرفیت باتری: ۲۲۰۰mAh ، ۲۲/۲۷Wh ، ۴۸/۸۴Wh

✓ شارژ کامل باتری در عرض ۴ ساعت

✓ ۲۰ ساعت کارایی دستگاه



## جزئیات دستگاہ

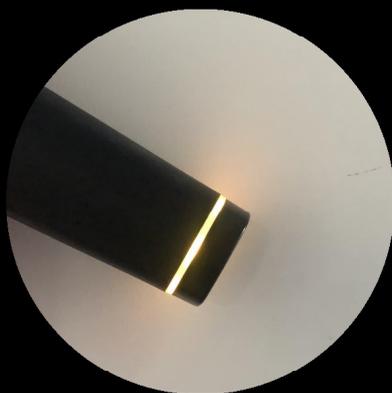

✓ دسته با روکش ضد لغزش  
✓ باتری با چراغ LED  
(نشانگر وضعیت شارژ باتری)



✓ کلید خاموش/روشن دستگاہ  
✓ درگاه شارژ باتری




✓ ضامن باتری



✓ صفحه کلید دستگاہ  
✓ نمایشگر:  
باتری، شدت، وضعیت دستگاہ

## صفحه کنترل دستگاه

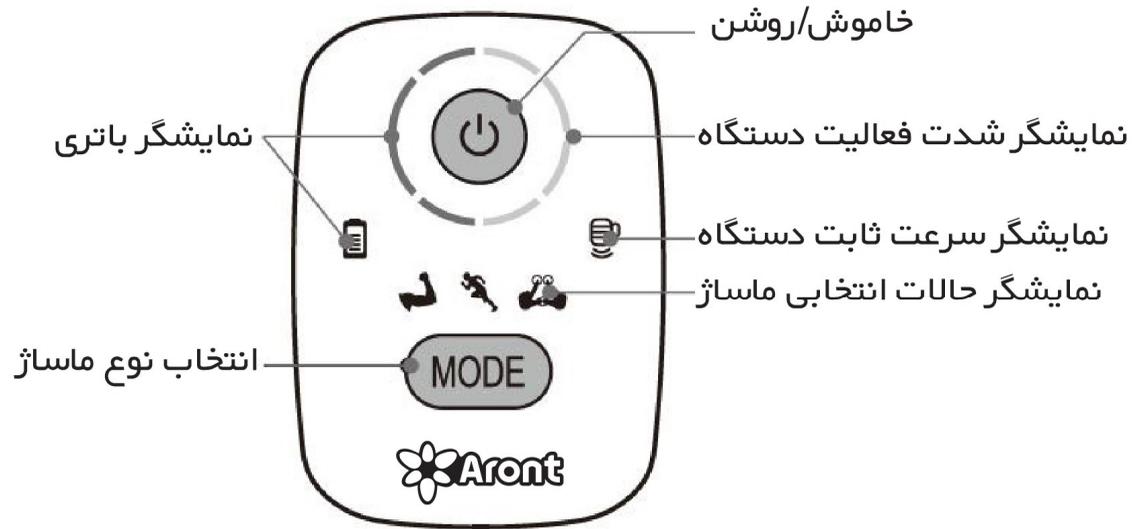

## راهنمای دستگاه

نمایشگر باتری : وقتی شارژ باتری در وضعیت کامل باشد نشانگر آن با ۴ خط نمایش داده میشود اما زمانی که در وضعیت کم قرار بگیرد شروع به چشمک زدن مینماید.

نمایشگر شدت: هرچه خطوط بیشتری روشن باشد، سطح شدت بالاتر میباشد. نمایشگر حالت: برای تغییر حالت و نوع ماساژ کلید MODE را فشار دهید. خاموش/روشن: با فشردن این دکمه دستگاه روشن میشود و با سرعت پایین شروع به کار مینماید و با فشردن مجدد دکمه میتوانید تا ۴ سطح سرعت دستگاه را تنظیم نمایید.

نمایشگر باتری: نشان دهنده وضعیت باتری دستگاه.

نمایشگر سرعت: در زمان استفاده از دستگاه با سرعت ثابت چراغ آن روشن میباشد.

## مشخصات دستگاه

✓ Model : RT1052

✓ Name : Deep Tissue Massage Gun





**Aront**

شرکت نیکان آسا پرشین

نماینده انحصاری ماساژور های آروننت در ایران